



Luxus PlasmaLiner

THE GERMAN ORIGINAL



Der Einsatz von Plasma in der ästhetischen Kosmetik ist revolutionär, bahnbrechend und im Bereich der ästhetischen Kosmetik relativ neu.

Wir freuen uns Ihnen unser einzigartiges und hochwertiges Produkt vorstellen zu dürfen.

» Lassen Sie sich begeistern!


WAS IST PLASMA?

- » Grundsätzlich eher im Universum als auf der Erde vorzufinden
- » 99% der sichtbaren Materie im Universum besteht aus Plasma
 - » (z.B. Sterne, Sonne & Sonnenwinde sind im Plasmazustand)
- » Wird als 4. Aggregatzustand bezeichnet
- » Natürliche Plasmen sind auf der Erde z.B. in Blitzen vorzufinden
- » Nutzbares Plasma muss für die Anwendung erzeugt werden



Plasma entsteht, indem man einem Gas so viel Energie (Hitze) zuführt, dass eine kritische Anzahl von Elektronen die Atomhüllen verlässt.

» Ein solches ionisiertes Gas ist elektrisch leitfähig.

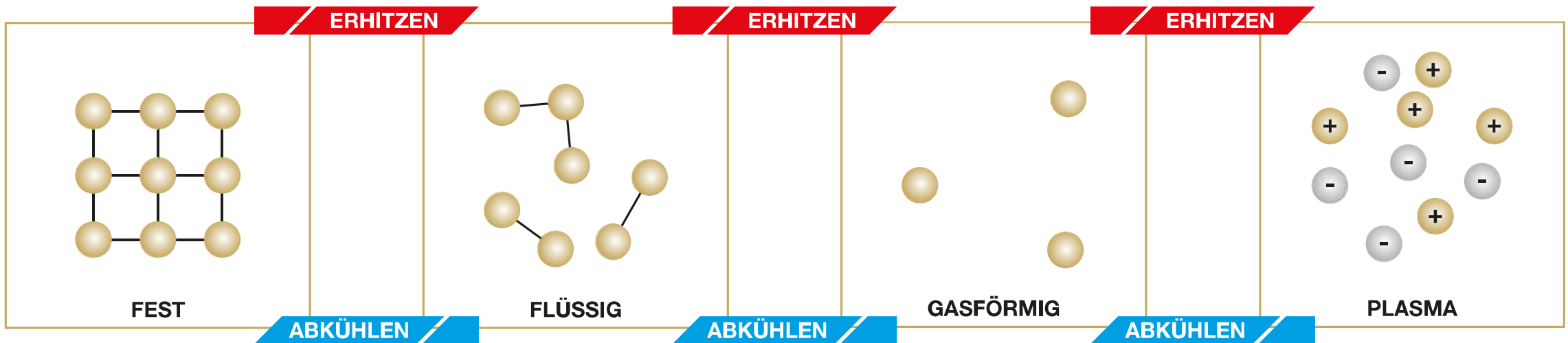

Warum unser Luxus PlasmaLiner?

- » In Deutschland entwickelt und in enger Zusammenarbeit mit:
 - » Elektronikern
 - » Ärzten
 - » Ingenieuren

Vorteilhaftes Arbeiten durch:

- » kein lästiges Dauer-Knopf-Halten
- » Leistungsstarker Akku
- » Kabellos
- » 2 Leistungsstärken für verschiedene Anwendungsareale
- » Integrierte Doppel-LED-Arbeitsleuchte
- » Zahlreiche Aufsätze für diverse Einsätze im Gesicht und am Körper

Der Luxus PlasmaLiner

- » NISV konfirm
- » Hochmodernes, deutsches Qualitätsprodukt aus renommierter Herstellung
 - » mit höchsten Qualitäts-, Sicherheits- und Kontrollstandards hergestellt
 - » maximale Wirksamkeit für therapeutischen Nutzen
- » CE zertifiziert
- » Komfortable Handhabung
- » Modernes, luxuriöses und ergonomisches Design
- » speziell für den kosmetischen Bereich entwickelt
- » Konstante Energiedichte durch Regeltechnik



Der Luxus PlasmaLiner

- » fundierte Wissensvermittlung inkl. fachlicher Nachbetreuung
- » Weiterbildungsmöglichkeiten
- » Begeisterte Kunden
- » Neukundengewinnung
- » Attraktive Verdienstmöglichkeiten
- » Wirtschaftlicher Erfolg
- » berufliche Unabhängigkeit
- » Umfangreiche Werbeunterstützung
- » Internationales Trainerteam & Support

UNSER SERVICE FÜR UNSERE ABSOLVENTEN

- » Begleitung in allen Belangen der Verkaufsförderung
- » Unterstützung bei Ihren Marketingmaßnahmen
- » Wir stellen Ihnen effiziente Marketinginstrumente zur Verfügung wie z.B.
 - » Flyer
 - » Poster
 - » Fotos
 - » Videos
 - » uvm.

DIE ANWENDUNG MIT UNSEREM PLASMA-PEN

- » Ohne direkten Hautkontakt (ca. 1mm oberhalb der Hautoberfläche)
- » Zwischen Haut und Spitze des Geräts wird ein ionisierter Lichtbogen erzeugt
 - » dieser lässt überschüssige Haut punktuell verdampfen
 - » die unmittelbar umliegende Haut zieht sich dadurch zusammen
- » Individuelle Anordnung der Punkte ermöglicht Reduktion von Hautüberschuss
- » **DAS ERGEBNIS: deutliche Straffung des betreffenden Hautareals**



DURCH DIE EINWIRKUNG AUF DIE HAUTGERÜSTE

- » Werden positive Effekte herbeigeführt wie z.B.
 - » Verbesserung der Hautelastizität
 - » Erneuerung von Gewebe
 - » verdampfende & gewebstraftende Wirkung

- » Die Regenerationszeit beträgt in der Regel 7-14 Tage

- » Durch die Anregung der Kollagensynthese in den Fibroblasten wird sich die Straffung noch über Wochen verstärken.



ZAHLREICHE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- » Ober- und Unterlidstraffung

- » Faltenbehandlungen:
 - » Krähenfüße
 - » Stirnfalten
 - » Zornesfalte
 - » Ohrenfalten
 - » Lippenfalten
 - » Marionettenfalte
 - » Nasolabialfalte
 - » Augenbrauenlifting

ZAHLREICHE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

- » Fullface-Lifting
- » Mini-Facelifting
- » Halsfalten
- » Dekolletéfalten

- » Verjüngung der Hände
- » Pigmentflecken-Entfernung
- » Reduzierung der Hautmängel

- » In Kombination mit Microneedling anwendbar zur Narben- und Aknenarbenbehandlung
- » Anregung des Haarwuchses (mit den Aufsätzen)

BEDINGT BEHANDELBAR

- » Xanthelasmen
- » Teleangiektasien
- » Blutschwamm (seniles Angiom, Hämangiom)

BITTE BEACHTEN!

- » Anwendung ausschließlich bei gesunder Haut durchführen
- » Kunde sollte körperlich gesund sein (frei von Infekten etc..)
- » 1 - 2 Wochen vorher kein Solarium
- » Keine frische Bräune (z.B. durch Urlaub oder Solarium)

KONTRAINDIKATIONEN

- » Keloidneigung (bereits evtl. vorhandene Narben zeigen lassen!)
- » Metallimplantate im Gesicht (direkt unter der Haut eingebrachte Implantate)
- » Kinder und Jugendliche (Behandlung erst ab 18 Jahren!)
- » Allergien gegen Anästhetika wie Lidocain
- » Bei Schwangeren (Anwendung erst nach der Schwangerschaft bzw. Stillzeit)
- » Krebs bzw. Chemotherapie und / oder Epilepsie
- » Bei jeglicher Art von Hautkrankheiten und/oder Entzündungen (vorläufig!)

NEBENWIRKUNGEN / BEGLEITERSCHEINUNGEN

- » Rötung
- » Schwellung
- » Hitzegefühl
- » Entzündungen – bei mangelnder Hygiene
- » Narbenbildung – bei Manipulation der entstandenen Kruste

IHRE VORTEILE EINER PLASMAANWENDUNG AUF EINEN BLICK

- » Narbenfreie Abheilung
- » Kurze Regenerationsphase
- » Anwendung ohne direkten Hautkontakt
- » Überkorrektur ausgeschlossen

ANWENDUNGSZEITRÄUME

- » Lidstraffung: etwa 1 - 3 Folgeanwendungen
- » Anwendung zur Faltenminderung: etwa 1 - 3 Folgeanwendungen
- » Entfernung erhabener Hautmakel: etwa 1 - 2 Folgeanwendungen
- » Bei Hautmakeln wie Altersflecken und Sonnenflecken ist in der Regel nur 1 Anwendung nötig
- » Bei Aknenarben (bei inaktiver Akne): etwa 3 – 4 Folgeanwendungen in Kombination mit Microneedling. Hier können Sie die Folgeanwendungen im Abstand von (mindestens) 4 Wochen durchführen.

HALTBARKEIT: WIE LANGE HÄLT DAS ERGEBNIS AN?

- » Der Alterungsprozess der Haut:
 - » geht nach der Anwendung weiter
 - » eine Operation stoppt den natürlichen Alterungsprozess auch nicht
 - » ist abhängig von den Lebensumständen

DIE RICHTIGE NACHSORGE

- » Die Nachsorge trägt maßgeblich zum gewünschten Erfolg bei
 - » klären Sie Ihre Kunden über die Wichtigkeit der Nachsorge auf
- » In Bewegung bleiben
 - » dies regt den Stoffwechsel an und fördert den Heilungsprozess
- » Einnahme Eiweiß und Vitamin C
 - » zur Unterstützung der Kollagensynthese
- » Viel Flüssigkeit aufnehmen
- » ausschließlich die empfohlenen Produkte verwenden

DIE RICHTIGE NACHSORGE

- » Bis zum vollständigen Abfall der Krusten (ca. 7 - 14 Tage) bitte vermeiden:
 - » Saunagänge
 - » Solarium
 - » schweißtreibende Sportarten
 - » Krusten selbstständig zu entfernen! – Gefahr der Narbenbildung

- » Die neue Haut ist rosa und sehr empfindlich
 - » dies hält bis zu mehreren Wochen an und ist kein Grund zur Beunruhigung

VORHER / NACHHER BILDER

» Zornesfalte



VORHER / NACHHER BILDER

» Oberlidstraffung



VORHER / NACHHER BILDER

» Unterlidstraffung



VORHER / NACHHER BILDER

» Altersflecken



VORHER / NACHHER BILDER

» Pigmentflecken



VORHER / NACHHER BILDER

» Erhabene Hautmakel



VORHER / NACHHER BILDER

» Milie



VORHER / NACHHER BILDER

» Halsstraffung



VORHER / NACHHER BILDER

» Nasolabialfalten



IHR EINSTIEG IN EINEN BOOMENDEN MARKT

- » Bietet Einsteigern grandiose Möglichkeiten
- » Amortisation in kürzester Zeit – auch ohne große Werbekosten
- » Diese Technologie „schlägt die Brücke“ zwischen Kosmetik und Medizin

IHRE VORTEILE

- » Aus eigenem Kundenstamm noch mehr Umsatz generieren
 - » nur durch ein Mailing oder „darüber reden...“
- » Viele neue Kunden gewinnen – einfach durch Live-Sessions in Ihrem Studio
- » Unsere Ausbildungsmodule sind einzeln buchbar
 - » können aber auch flexibel kombiniert werden
 - » Sie sparen durch Kombination einzelner Module

BASIC TRAINING

- » Ober- & Unterlidstraffung
- » Zornesfalte & Stirnfalten
- » Krähenfüße & Hautmakel



BASIC TRAINING – KURSIHALTE

- » Der Einsatz von Plasma in der ästhetischen Kosmetik
- » Weiterführende Informationen über die Wirkungsweise und Anwendungsgebiete
- » Kontraindikationen, Risiken & Nebenwirkungen – Was ist zu beachten?
- » Entzündungen
- » Hygiene am Arbeitsplatz
- » Wie führe ich ein Beratungsgespräch?
- » Anwendungsablauf
- » Dermatologie
- » Nachsorge und korrekte Aufklärung
- » Preisempfehlung & Zeitmanagement
- » Arbeiten an Modellen

ADVANCED TRAINING

- » Nasolabial- & Marionettenfalte
- » Kinn- & Halsfalten
- » Mund- & Lippenfalten
- » Champagnerbäckchen
- » Ohrenfalten
- » Mini-Facelifting



ADVANCED TRAINING – KUR SINHALTE

- » Verschiedene Arbeitstechniken
 - » Sprühtechnik
 - » Blocks setzen und deren Verbindung
- » Risiken & Nebenwirkungen – Was ist zu beachten?
- » Anwendungshäufigkeit
- » Anwendungsabläufe – verschiedene Areale
- » Nachsorge und korrekte Aufklärung
- » Preisempfehlung & Zeitmanagement
- » Arbeiten an Modellen

INVESTITION VS. UMSATZ FÜR DEN ERSTEN MONAT

Ihre Investition:

Basic-Training inkl. Luxus PlasmaLiner-Pen

3074,- €

Advanced-Training

350,- €*

SUMME

3424,- € netto

Das Gerät inkl. aller 5 ONLINE Plasma-Kurse 3.574 Euro netto.

Auf Anfrage sind Praxistage bei unseren Luxus PlasmaLiner Trainern in Ihrer Nähe buchbar.

Einen Kurs berechnen wir mit 150 Euro netto für einen halben Tag praktisches Arbeiten an Modellen.

*Sonderpreis bei Buchung von Kombi-Ausbildungstagen!

ZU ERWARTENDE UMSÄTZE IM ERSTEN MONAT

- » Planen Sie unbedingt ausreichend Übungszeit ein
 - » wir empfehlen ca. 10 Übungskunden
 - » geben Sie diesen Kunden einen kleinen Einführungspreis
 - » z.B. statt 350,- € für eine Oberlidstraffung „nur“ 200,- €
 - » arbeiten Sie diese Kunden zügig in etwa 4 – 6 Wochen

» Umsatz bei 10 Übungskunden in 4 – 6 Wochen 2.000,- €

Aus diesen 10 Trainingskunden generieren Sie über weitere Anwendungen z.B. 2. Anwendung Oberlid, Krähenfüße etc. zum Normalpreis von noch einmal mindestens 1.500,- € bis 2.000,- €.

- » Amortisation Ihrer Investition i.d.R. schon über Ihre 10 Trainingskunden
- » Füllen dieser Trainingskunden-Liste durch Vertrauenspotential
- » **TIPP: Erstellen Sie diese Liste bereits VOR Ihrer Ausbildung**
- » So starten Sie nahtlos durch zu Ihrem Erfolg

AUSBILDUNGSANGEBOT FÜR UMSTEIGER

- » Als Umsteiger* verfügen Sie bereits über Grundkenntnisse
 - » Einstieg in den Fortbildungs-Kurs „Advanced-Schulung“ möglich

Umsteiger-Paket:

Luxus PlasmaLiner-Pen exklusiv ONLINE Basis Kurs : 2874,- € netto

*Einen Nachweis über den Erwerb des Plasma Gerätes und die absolvierte Ausbildung eines in Deutschland ansässigen Anbieters ist hier erforderlich.

Unsere Preisempfehlung

AREAL	DAUER DER ANWENDUNG	PREIS
Oberlidstraffung	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 349,- €
Unterlidstraffung	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 149,- €
Krähenfüße	Dauer: 45 Min.	ab 149,- €
Augenbrauenlift	Dauer: 45 Min.	ab 99,- €
Stirnfalten	Dauer: 30 – 60 Min.	ab 149,- €
Zornesfalte	Dauer: 30 Min.	ab 99,- €
Ohrenfalten	Dauer: 30 Min.	ab 99,- €
Lippenfalten	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 199,- €
Pigmentflecken	Dauer: je nach Aufwand	ab 30,- €

Unsere Preisempfehlung

AREAL	DAUER DER ANWENDUNG	PREIS
Oberlidstraffung	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 349,- €
Unterlidstraffung	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 149,- €
Krähenfüße	Dauer: 45 Min.	ab 149,- €
Augenbrauenlift	Dauer: 45 Min.	ab 99,- €
Stirnfalten	Dauer: 30 – 60 Min.	ab 149,- €
Zornesfalte	Dauer: 30 Min.	ab 99,- €
Ohrenfalten	Dauer: 30 Min.	ab 99,- €
Lippenfalten	Dauer: 45 – 60 Min.	ab 199,- €
Pigmentflecken	Dauer: je nach Aufwand	ab 30,- €



SOFTPLASMA

Die Revolution in der Kosmetik

**Nadelfreie Mesotherapie
ohne Ausfallzeiten**

- Anti-Aging
- sanft
- schmerzfrei
- krustenfrei

SOFTPLASMA-Aufsätze

- » Die Aufsätze sind aus dem anti-allergenen Material **TITAN** gefertigt
- » Mehr zum Einsatz der Aufsätze erfahren Sie in unserer Softplasma-Präsentation





Luxus PlasmaLiner

THE GERMAN ORIGINAL